

# Dementenschutz-Systeme

Bircher CareMat® | Bellman&Symfon | Tunstall Homecare

Die Zahl der an Demenz erkrankten Menschen steigt beständig und schnell an. Die Betreuung von ganz oder teilweise orientierungslosen Personen wird zu einer immer größeren Herausforderung. Die Nachfrage nach zuverlässigen Wegläuferschutz-Systemen wächst stetig.

Die pflegenden Personen sollen entlastet werden. Wir bieten Ihnen verschiedene Alarmtrittmatten-Systeme an. Je nach Zusammenstellung sind diese für den Einsatz in der häuslichen Pflege bzw. in Einrichtungen optimiert.



## Wegläuferschutz mit Trittmatte

Unsere Systeme mit Kontaktmatten/Alarmtrittmatten arbeiten prinzipiell ähnlich:

Die Trittmatte wird vor das Bett oder die Tür gelegt. Sie löst per Funk ein Signal am Empfänger aus, sobald jemand auf die Matte tritt.

Die Systeme sind ideal für den Einsatz als Wegläuferschutz im Innenbereich geeignet.

Durch den Alarm an dem Funk-Empfänger wissen Sie, dass die zu betreuende Person aufgestanden ist oder vor der Tür steht. Nun können Sie reagieren und sie zurück begleiten.

Die Alarmtrittmatte erleichtert Ihnen die Betreuung von „Nachtwanderern“ und „Wegläufern“. Sie werden stets zuverlässig und sicher informiert.

Diese Lösung bietet ein sehr hohes Maß an Privatsphäre, da nicht in den Raum der zu betreuenden Person herein gehört oder gesehen wird.

Ihnen steht eine große Auswahl an Empfängern zur Verfügung. Für jede Situation bieten wir Ihnen die passende Alarmierungsmethode. Ob dezenter Taschenvibrator, extra lauter Funk-Gong, starker Vibrationswecker oder weitreichend per Anruf auf Ihr Handy. Zudem ist die Anbindung an die Schwestern-Rufsysteme in Einrichtungen möglich.

Unsere Funk-Systeme sind problemlos erweiterbar. Es stehen Ihnen viele verschiedene Funk-Sender wie z.B. Rufknöpfe, Rauchmelder, Türklinglelerkennung oder unser RFID-Armband Wegläuferschutzsystem „Raphael-home“ zur Verfügung.

## Wir liefern Ihnen Ihre optimale Lösung!



# Wegläuferschutz mit Trittmatte

Wir unterscheiden die einfachen Systeme für den Privatbereich mit dünnen Matten, die unter einem Bettvorleger oder einer Schmutzfangmatte gelegt werden und die robusten starken Matten für den professionellen Pflegebedarf. Sie haben zudem die Wahl, wie die Signalisierung durchgeführt werden soll.

Ein System besteht immer aus mindestens 2 Komponenten.

## 1. Alarmtritt-Matte

### Privat-Lösung mit Bellman&Symfon aus Schweden

Dünne Matte 700\*390\*2 mm (B\*H\*T) mit externem Funk-Sender wird unter Bettvorleger oder Schmutzfangmatte gelegt! Wir blicken auf viele verkaufte Systeme mit tollem Feedback von den Angehörigen: zuverlässig, flexibel & erweiterbar.

Ideal im Set mit Funk-Sender BE1431 und Funk-Empfänger BE1450.

### Profi-Lösung mit Bircher CareMat® aus der Schweiz

Diese sehr robusten Matten sind in 3 Größen A (1100\*700\*9mm eckig), B (700\*400\*9 mm eckig) und C (1100\*700\*9mm halbrund), mit eingebautem Funk-Sender oder mit offenen Kabelenden lieferbar.

Sie sind langlebig, zuverlässig, rutschfest, leicht zu reinigen, hygienisch unbedenklich und daher optimal für den professionellen Einsatz geeignet.

Einsatz als eigenständiges Funk-System oder mit Anbindung an vorhandene Rufsysteme.

## 2. Empfänger

### Funk-System Visit868 von Bellman&Symfon aus Schweden

Das Bellman Visit868 System ist ein sehr flexibles System. Sie haben eine große Auswahl an Sendern und Empfängern. Diese können problemlos kombiniert und parallel betrieben werden. Wenn Sie z.B. einen tragbaren Empfänger (Schwesternzimmer) und einen Taschenvibrator (Pflegepersonal) nutzen, wird der Alarm auf beiden Empfängern ausgelöst! Sollten Sie mehrere Matten einsetzen, sehen Sie am Empfänger welche Matte ausgelöst wurde. Im häuslichen Umfeld wird der tragbare Empfänger BE1450 am häufigsten eingesetzt. Jeder Sender signalisiert mit unterschiedlichen Ton- und Lichtsignalen am Empfänger.

### Profi-Funk Personenruf CareAssist von Tunstall


Dieser Funk-Empfänger ist für den Pflegeeinsatz konzipiert. Er meldet durch Pieptöne und Vibration. Im LCD-Display wird die Person / der Raum des ausgelösten Senders in Textform angezeigt. Der Alarm muss von der Betreuungsperson quittiert werden.

### Hausnotruf Lifeline Vi/Vi+ /GSM von Tunstall

Bei dieser Alarmierungsart werden Sie per Telefonanruf informiert, dass der Sender ausgelöst wurde. Der Vorteil ist hier die unbegrenzte Reichweite, da auf Ihr Mobiltelefon angerufen werden kann. Wir haben Lösungen für den klassischen Telefonanschluss, für VoIP oder sogar mit Handykarte (GSM).

### Schwesternrufanlage /Aufschaltung auf Lichtrufsystem

Der Funkempfänger wird an die bestehende Schwesternrufanlage aufgeschaltet. Wir liefern Sender und Funkempfänger als Set komplett betriebsfertig für Ihre vorhandene Anlage. Eine zusätzliche Anbindung durch den Errichter bzw. Betreuer der Anlage ist im Regelfall nicht nötig.

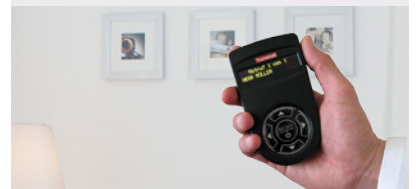

## Seniorentechnik-Martin.de

Dementenschutz  
Lichtsignalanlagen  
GPS-Ortung  
Ruf-Systeme

