

# FFP


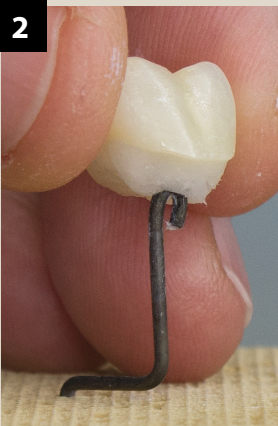
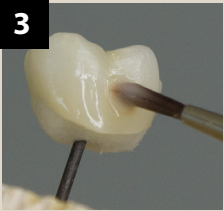
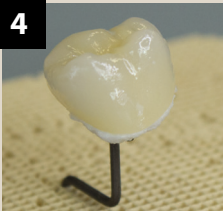
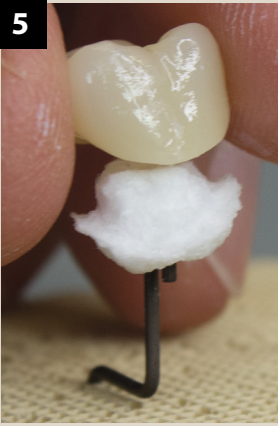
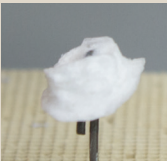

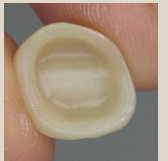

- mehr Sicherheit -  
die kleine Spritze mit großer Wirkung

excellence  
line

## Fix Firing Paste - Brennträgerpaste



Die Fix Firing Paste ist eine gebrauchsfertige Paste zum Herstellen von individuellen Brenntutträgern. Mit diesem feuerfesten Material können Inlays, Onlays, Veneers, Kronen und Brücken sicher auf Pins positioniert oder direkt auf dem Brenntutträger fixiert werden.

<p><b>1</b></p>  <p>Gebrauchsfertige Fixierungspaste direkt in die Keramikrestauration applizieren</p>	<p><b>2</b></p>  <ul style="list-style-type: none"><li>- auf dem Haltestift fixieren</li><li>- bei Veneers/Inlays direkt auf die rückseitige Fläche</li><li>- auch ein direktes Fixieren auf dem Brenntutträger ist möglich, <u>dabei bitte die Restaurationen etwas höher befüllen</u></li></ul>	
<p><b>3</b></p>  <p>weitere Arbeitsschritte wie schichten, bemalen ...</p>	<p><b>4</b></p>  <p>brennen</p>	<p><b>5</b></p>     <p>Nach dem Keramikbrand Restaurationen einfach vom Brennwatte-Stumpf abheben.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- leicht zu entfernen</li><li>- kein Abstrahlen oder Herauskratzen notwendig</li></ul> 

### Anwendungsbereich / Eigenschaften:

- Stabilisierung von schwierig zu fixierenden Keramikarbeiten beim Brennvorgang im Keramikofen
- einfache Applikation durch gebrauchsfertige Spritze
- keinerlei Verfärbungen der Keramik nach dem Brand
- leicht zu entfernen, kein Abstrahlen oder Herauskratzen notwendig
- keine Verlängerung der Vortrocknungszeit im Keramikofen notwendig

Inhalt / Spritze: 12ml

Fix Firing Paste

1 Spritze / 12ml

Art.: 399-1000

Fix Firing Paste ( 5 Stk. )

5 Spritzen mit je 12ml

Art.: 399-1005