



MAD Nasal

Intranasaler mukosaler Medikamentenzerstäuber

Die sichere, schmerzlose Medikation ohne intravenösen Zugang.

Medikamentenverabreichung

Der MAD Nasal Zerstäuber von Teleflex wurde von einem Notfallmediziner entwickelt und bietet eine nützliche, zusätzliche Option bei der Wahl eines Alternativzugangs für Medikationszwecke.*

Schneller Wirkungseintritt

Nasale Medikamentenverabreichung mit dem MAD Nasal Zerstäuber ist schnell und einfach, erspart die Zeit für das Anlegen einer Infusion und somit auch wertvolle Ressourcen. Darüber hinaus ist keinerlei sterile Technik erforderlich, so dass mehr Zeit für den Patienten zur Verfügung steht und weniger Zeit für das schmerzhaftere Anlegen einer Infusion nötig ist.

Vorteile



Der Kliniker

Kein lästiges und zeitaufwendiges Anlegen einer Infusion



Ihre Einrichtung


Kein zeitaufwendiges Anlegen einer Infusion, keine Gefahr von Nadelstichen und somit keine Notwendigkeit, eine Einstichstelle zu desinfizieren



Der Patient

Sichere, schmerzlose und schnell wirksame Behandlung von Kindern und Erwachsenen

*Für den Gebrauch mit für intranasale Verabreichung zugelassenen Medikamenten.

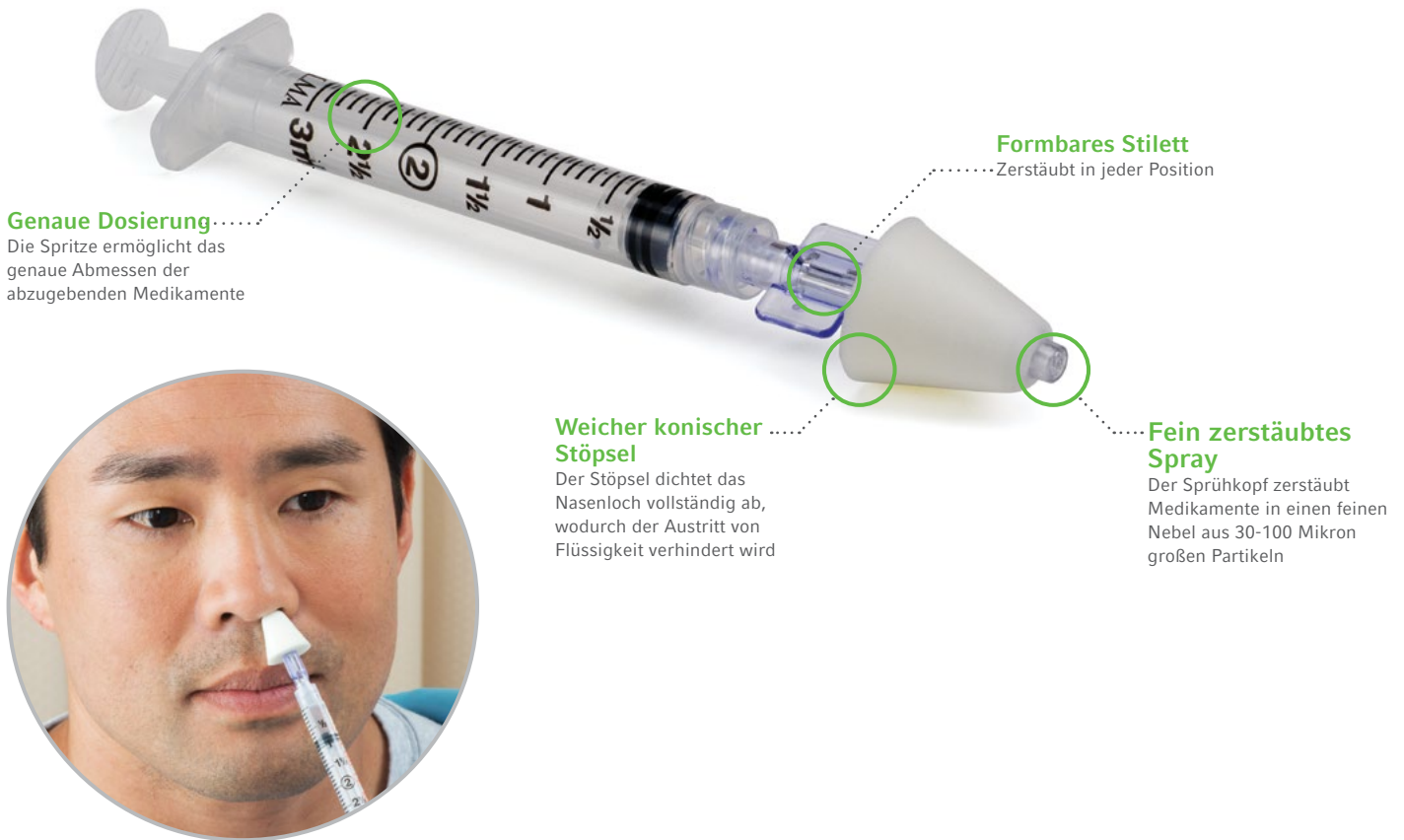

Genauere Dosierung
Die Spritze ermöglicht das genaue Abmessen der abzugebenden Medikamente

Formbares Stilett
Zerstäubt in jeder Position

Weicher konischer Stöpsel
Der Stöpsel dichtet das Nasenloch vollständig ab, wodurch der Austritt von Flüssigkeit verhindert wird

Fein zerstäubtes Spray
Der Sprühkopf zerstäubt Medikamente in einen feinen Nebel aus 30-100 Mikron großen Partikeln

Spezifikationen MAD Nasal intranasaler mukosaler Medikamentenzerstäuber

Typische Partikelgröße	30-100 µm
Systemtotraum	MAD100/MAD140 = 0,12 ml MAD100OS/MAD140OS = 0,13 ml MAD110/MAD110OS = 0,15 ml MAD130/MAD130OS = 0,15 ml MAD300 = 0,06 ml
Spitzendurchmesser	0,17" (4,3 mm)

MAD Nasal intranasaler mukosaler Medikamentenzerstäuber

ART. NR.	PRODUKTBESCHREIBUNG	EINHEITEN/BOX
MAD100	MAD Nasal Zerstäuber mit 3-ml-Spritze	25
MAD100OS	MAD Nasal Zerstäuber mit 3-ml-oraler Spritze	25
MAD110	MAD Nasal Zerstäuber mit 1-ml-Spritze	25
MAD110OS	MAD Nasal Zerstäuber mit 1-ml-oraler Spritze	25
MAD130	MAD Nasal Zerstäuber mit 1-ml-Spritze und Entnahmespike	25
MAD130OS	MAD Nasal Zerstäuber mit 1-ml-Spritze und Entnahmespike	25
MAD140	MAD Nasal Zerstäuber mit 3-ml-Spritze und Entnahmespike	25
MAD140OS	MAD Nasal Zerstäuber mit 3-ml-oraler Spritze und Entnahmespike	25
MAD300	MAD Nasal Zerstäuber ohne Spritze	25

Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie Imaco.com/products

Teleflex, das Teleflex Logo, MAD und MAD Nasal sind in den USA und/oder anderen Ländern Marken oder eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder dessen Tochterunternehmen. Die Informationen in diesem Dokument ersetzen nicht die Gebrauchsanweisung für das Produkt. Die in diesem Dokument aufgeführten Produkte sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertreter. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung (07/2017). Technische Änderungen ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten. © 2016 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.
94 06 95 - 00 00 00 - REV A - 07 17 02

Teleflex

Vertrieb durch: Teleflex Headquarters International, Irland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business & Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Deutschland Tel. +49 (0)7151 406 0 · info.de@teleflex.com
Österreich Tel. +43 (0)1 402 47 72 · rueschaustria@teleflex.com
Schweiz Tel. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com
www.teleflex.com